



Drawing

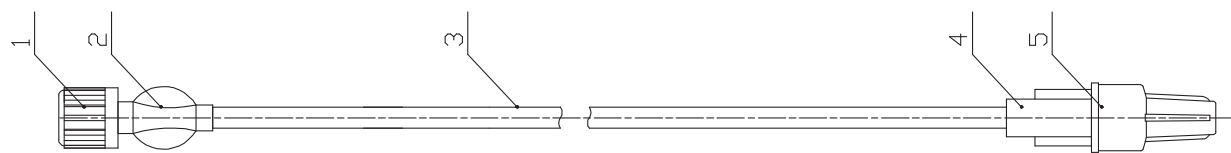

Material	01 Protective cap	PE, translucency	04 Female LL connector	PC transparent
	02 Male LL connector	ABS, transparent	05 Protective cap	PP transparent/translucency
	03 Tubing	PVC / DEHP FREE material		
		O.D.: 3,0mm I.D.: 1,8mm		

Layout/Inner box

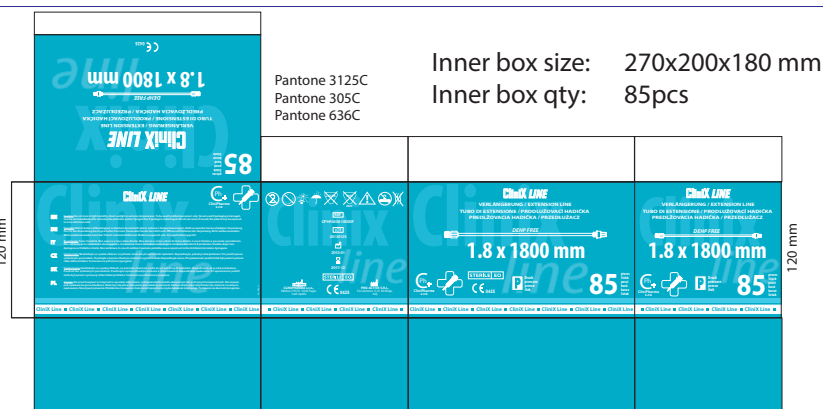

Layout/Soft blister

CliniX LINE
VERLÄNGERUNG / EXTENSION LINE
TUBO DI ESTENSIONE / PRZEDŁUŻACZ
PRODLUŽOVACÍ HADIČKA
PREDLŽOVACIA HADIČKA
1.8 x 1800 mm

Instructions: 1) Remove the protective cap; 2) Connect the extension to IV administration set through the specific connector, and if there is a stopcock, open or close the tap to accept the flow; 3) let the solution flow and remove eventual air bubbles.
Caution: Do not store in high humidity, direct sunlight or extreme temperatures. To be used by skilled personnel only. Do not use if packaging is damaged. Use the set immediately after removing the protective system. Prolonged use of the package is undamaged. Do not use reuse. If reused, the patient may be exposed to cross-infection risks.

Instructions: 1) Rimuovere i cappucci di protezione; 2) collegare il set di estensione al set di somministrazione attraverso gli appositi raccordi; 3) se presente il rubinetto, aprire o chiudere la relativa via d'accesso; 3) far defluire la soluzione ed eliminare eventuali bolle d'aria.
Avvertenze: Tenere l'unità. Non esporre a luce solare diretta. Non stoccare vicino a fonti di calore dirette. L'uso è limitato a personale specializzato. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o manomessa. Usare immediatamente dopo la rimozione dei sistemi di protezione. Smaltire dopo l'uso. Ripiegare se l'impiego è istantaneo. Non riutilizzare. In caso di riutilizzo il paziente potrebbe essere esposto al rischio di infezioni incrociate. Aprioregno.

Návod na použitie: 1) Odstaňte ochranné kryty; 2) Pripojte predlžovaciu hadičku k infúznemu setu cez konštrukciu a ak je tam viaccestný kohútik, otvoríte ho na zabezpečenie prietoku; 3) Nechajte roztek tekutiny a odstráňte prípadné vzduchové bubliny.
Upozornenie: Neskladujte vo vysokých vlhkostiach, na priamom slnečnom svetle ani pri extrémnych teplotách. Nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený. Používajte ihneď po otvorení a vybrať baliť. Nepoužívajte opakovaním. Používajte súpravu ihneď po otvorení a vybrať baliť. Nepoužívajte opakovaním. Používajte súpravu ihneď po otvorení a vybrať baliť. Testované na prírodnosť pyrogénov.

Indukční údržba: 1) Zdržte ovládací ochranné kryty; 2) Připojte prodlužovací hadičku k infúznímu setu cez konštrukciu a ak je tam viaccestný kohútik, otvoríte ho na zabezpečenie prietoku; 3) Nechajte roztek tekutiny a odstráňte prípadné vzduchové bubliny.
Upozornění: Neskladujte ve vysoké vlhkosti, na přímém slunečním světle ani při extrémních teplotách. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený. Používejte ihle po otevření a vybrat balení. Nepoužívejte opakovaně. Používejte soupravu ihle po otevření a vybrat balení. Testováno na přítomnost pyrogenů.

Druck pressure pressione
STERILE EO
CE 0425

REF LOT

CPHF4008-1800DF 2021-06 20210625 2026-05

Blister size:
175x110 mm

Printing size:
140x58 mm

Printing color:
PANTONE BLACK

Print without frame

Layout/Sticker on carton

CliniX LINE
VERLÄNGERUNG / EXTENSION LINE
TUBO DI ESTENSIONE / PRODLUŽOVACÍ HADIČKA
PREDLŽOVACIA HADIČKA / PRZEDŁUŻACZ
DEHP FREE
1.8 x 1800 mm
340
STERILE EO
CE 0425
Druck pressure pressione
CLINIPHARMA s.r.o., Václavova 1795/10, 130 00 Prague, Czech republic
PRO-ACTIVE S.R.L., Via Commercio 12, 45 100 Rovigo, Italy

Printing size:
180x140 mm

Printing color:
PANTONE BLACK

2 stickers glued on shipping carton

Packaging

corrugated cardboard, without iron pins, no plastic strips

Size: 420x290x380 mm
Ctn: 340 pcs
Weight ctn: 5,9 kg

Volume: 0,046284 cbm
Palette: 12.580 pcs (cca 37 ctn)

Sterilization
EO sterilization

Guaranty
5 years

PRODUCTION LIST
CPH-PrL-CX2 rev.0/12-2021