


Drawing

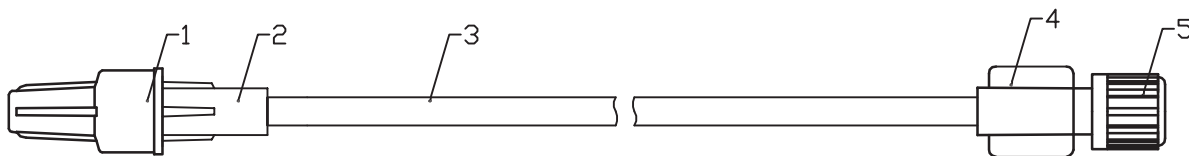

Material

01 Protective cap	PE, translucency
02 Male LL connector	ABS, transparent
03 Tubing	PVC DEHP FREE material O.D.: 2.7mm I.D.: 1.5mm
04 Female LL connector	PC transparent
05 Protective cap	PP transparent/translucency

Layout/Soft blister

PRO-LONG TUBE

Infusionsleitungen für Spritzenpumpen
Tubing for syringe pump / Perfusione prolunghe
Perfuzní hadička / Perfúzna hadička
Przedłużacz do pomp strzykawkowych

PERFUSION LINE 200

Gebruiksaanwijzing: 1) Entfernen Sie die Schutzkappen; 2) Konektieren Sie das Verlängerungs-Set am IV-Set mit dem spezifischen Verbindungsstück und öffnen Sie diese um den Fluss zu ermöglichen; 3) Öffnen Sie dann den Flow-Regler, damit Flüssigkeit fließen kann und entfernen Sie eventuell vorhandene Luftblasen.

Varování: Nicht in hoher Luftfeuchtigkeit, in direktem Sonnenlicht oder in extremen Temperaturen lagern. Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung. Nur für die Anwendung durch geschultes Personal. Verwenden Sie das Set sofort nach Öffnen und Entfernen der Verpackung. Nicht wiederverwenden. Wenn wiederverwendet, kann der Patient zu Kreuzinfektionen Risiken ausgesetzt sein. Pyrogenfreiheit geprüft.

Use instructions: 1) remove the protective caps; 2) Connect the extension to IV administration set through the specific connector, and if there is a stopcock, open or close the tap to accept the flow; 3) let the solution flow and remove eventual air bubbles.

Caution: Do not store in high humidity, direct sunlight or extreme temperatures. To be used by skilled personnel only. Do not use if packaging is damaged. Use the set immediately after removing the protective system. Pyrogen free if package is undamaged. Do not use reuse. If reused, the patient may be exposed to cross-infection risks.

Istruzioni d'uso: 1) Rimuovere i cappucci di protezione; 2) collegare il set di estensione al set di somministrazione attraverso gli appositi raccordi e, se presente il rubinetto, aprire o chiudere le relative vie d'accesso; 3) fare defluire la soluzione ed eliminare eventuali bolle d'aria.

Avvertenze: Tenere l'umidità. Non esporre a luce solare diretta. Non stoccare vicino a fonti di calore dirette. L'uso è limitato a personale specializzato. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o manomessa. Usare immediatamente dopo la rimozione dei sistemi di protezione. Smaltire dopo l'uso. Astenersi se l'imballaggio è intatto. Non riutilizzare. In caso di riutilizzo il paziente potrebbe essere esposto al rischio di infezioni incrociate. Astenersi.




Návod na použití: 1) Odstráňte ochranné kryty; 2) Pripojte predlžovací hadičku k infúznemu setu špecifickým konektorom a ak je tam zastavovací kohútik, otvoríte ho na zabezpečenie prútu; 3) Nechajte roztok pretekať a odstráňte prípadné vzduchové bubliny.

Upute: Ne izlađivati u visokoj vlažnosti, na pramenu direktnog svetla ani pri ekstremnim temperaturama. Ne koristiti ako je oštećeno pakovanje. Može biti upotrebljen samo od strane osoblja. Upotrebljavati odmah nakon otvaranja i uklanjanja pakovanja. Ne upotrebljavati ponovno. Ako se pakovanje koristi ponovno, pacijent može biti izložen riziku križne infekcije. Testirano na prisutnost pirogena.

Upute: Ne izlađivati u visokoj vlažnosti, na pramenu direktnog svetla ani pri ekstremnim temperaturama. Ne koristiti ako je oštećeno pakovanje. Može biti upotrebljen samo od strane osoblja. Upotrebljavati odmah nakon otvaranja i uklanjanja pakovanja. Ne upotrebljavati ponovno. Ako se pakovanje koristi ponovno, pacijent može biti izložen riziku križne infekcije. Testirano na prisutnost pirogena.

Instrukcja użycia: 1) Zdjąć osłony ochronne; 2) Podłączyć rurkę przedłużającą do zestawu infuzyjnego przez złącze; 3) Jeśli jest kurpek wielodrożny, otworzyć go, aby zapewnić przepływ; 3) Pozwolić na przepływ roztworu i usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza.

Uspika: Nie przechowywać w miejscach o wysokiej wilgotności, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w skrajnych temperaturach. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Może być używane tylko przez przeszkolony personel. Zestaw należy użyć natychmiast po otwarciu i usunięciu opakowania. Nie używać ponownie. Wielokrotne stosowanie może narażać pacjenta na ryzyko zakażenia krzyżowego. Testowane na obecność pirogenów.

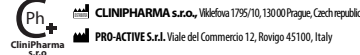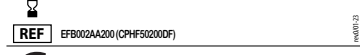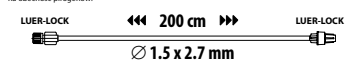

Blister size:
175x110 mm

Printing size:
145x54,5 mm

Printing color:
PANTONE BLACK

Print without frame

Layout/Sticker on carton



Printing size:
180x140 mm

Printing color:
PANTONE BLACK

2 stickers glued on
shipping carton

Packaging

corrugated cardboard, without iron pins, no plastic strips

Size: 380x250x255 mm

Volume: 0,0242 cbm

Ctn: 200 pcs

Palette: 12.600pcs (63 ctn)

Weight ctn: 3 kg

1.2 x 0.8 x 2.0 m

UDI-DI

Blister: 08034028275371

Carton: 28034028275375

Sterilization

EO sterilization

Guaranty

5 years

PRODUCTION LIST

CPH-PrL-PL2 rev.2/01-2023