
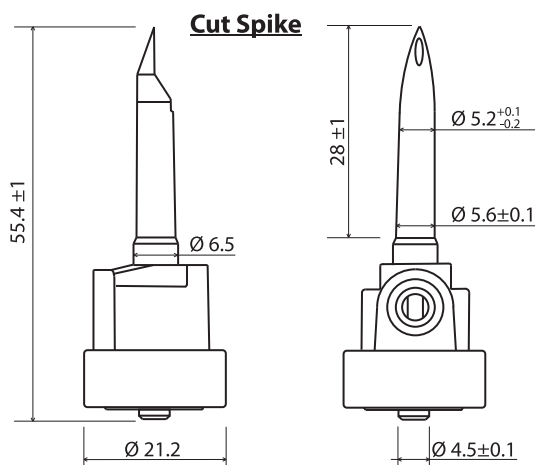



### Drawing

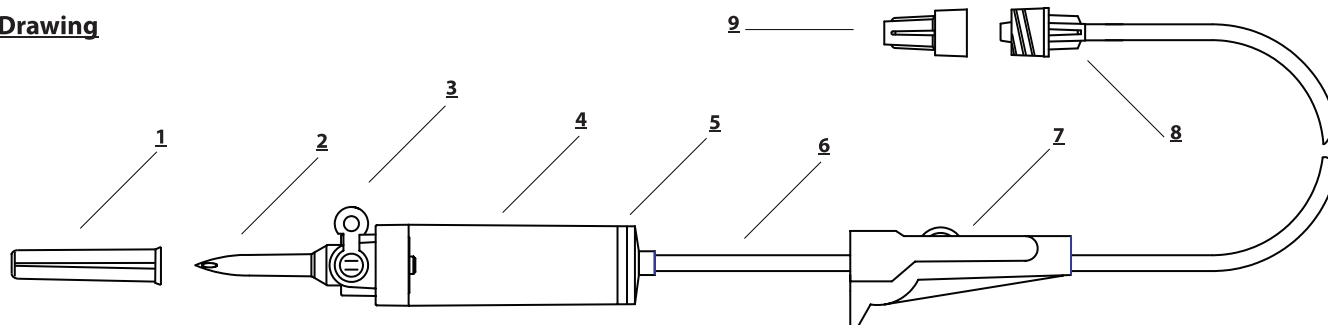

## Material

01 Protective cap	PE
02 Vented spike	ABS, white
03 Air inlet	PP+PTFE
04 Drip chamber	PVC or DEHP FREE Ø16.3x55mm
05 Fluid filter	ABS+PA
06 Tubing	PVC or DEHP FREE Ø2.9x4.1mm
07 Roller clamp	ABS transparent/white + blue wheel
08 LuerLock connector	MBS
09 Protective cap	PE+PTFE

### **Layout/Soft blister**

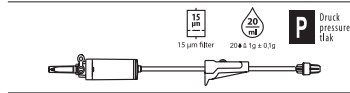

1) Introdurre il perforatore nel contenitore di soluzione (sacca o fiamme); 2) chiudere i regolatori di flusso; 3) capovolgere il contenitore di soluzione e comprimere la camera e riempirla fino a metà; 4) aprire i regolatori; 5) aprire l'attacco della presa d'aria (nel caso di soluzione in bottiglia); fare defluire la soluzione ed eliminare eventuali bolle d'aria.

**Avvertenze:** Tenere i bambini. Non esporre a luce solare diretta. Non stoccare vicino a fonti di calore dirette. L'uso è limitato a personale specializzato. Non usare con siringhe, emoderivati o soluzioni ad alta viscosità. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o manomessa. Usare immediatamente dopo la rimozione dei sistemi di protezione. Sembrare dopo l'uso. Agitare se si formano i cristalli. In tal caso, non riutilizzare. In caso di riutilizzo il paziente potrebbe essere esposto al rischio di infezioni incrociate. **Attenzione:** Contiene fluidi.


1) Führen Sie den Dem in den Lösungsbehälter (Beutel oder Flasche) ein. Zerschneiden Sie den Flow-Rack; 2) Drücken Sie den Lösungsbehälter auf den Kopf, drücken Sie auf die Kammer, bis sie halb gefüllt ist; 3) Öffnen Sie dann den Flow-Rack; 4) Öffnen Sie die Luftabzugskappe (im Falle einer Lösung in der Flasche); Drücken die Flüssigkeit fließen lassen und entfernen Sie eventuell vorhandene Luftbläschen. Vorsicht: Nicht in hoher Luftfeuchtigkeit, in direktem Sonnenlicht oder in extremen Temperaturen lagern. Nicht zur Verwendung bei Blut, zellulären Komponenten und hochviskosen Lösungen. Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung. Nur für die Anwendung durch geschultes Personal. Verwenden Sie das Set sofort nach Öffnen und Entfernen der Verpackung. Nicht wiederverwenden. Wenn wiederverwendet, kann der Patient zu Kreuzreaktionen mit Blut ausgesetzt sein. Pyrogenfreiheit geprüft. **Fließen enthält.**

1) Uložte tm do nádoby na roztok (sáček nebo láhev); 2) uzavřete regulátor průtoků; 3) stiskněte korektur tlač, aby byla do polohy **plná**; 4) přetvorte regulátor průtoků 5) Stisknete ovládací ventil (pokud je levá roztok), aby tekutina mohla vytect a oddělit volné vázání volné buňky.

Upozornění: Nesledujte ve vysoké vlhkosti, na přímém slunci ani při extrémních teplotách. Nepoužívat s krví, buněčnými složkami a roztoky s vysokou viskozitou. Nepoužívejte, pokud je ocel polízen. Pro použití pro vyšetření persónal. Používejte soupravy ihned po otevření a vyjmání z obalu. Nepoužívejte znovu. Při opakovaném použití může být pacient vystaven riziku křivé infekce. Testování na přítomnost protilátek. Nepoužívejte Itálie.

1) Vložte trň do nádoby na roztok (sáčok alebo fľaša); 2) uzavrite regulátor prietoku; 3) vložte korróziu kým nie je do polovice plná; 4) potvrdíte otvoru regulátor prietoku; 5) Otvorte odvzdušňovací ventil (ak je vo fľaši roztok), aby tekutina mohla prúdiť a odstrániť všetky vzduchové bubliny.  
Upozornenie: Neodkladajte vo vysokých výškach, na priame slnečné svetlo ani pri extrémnych teplotách. Nepoužívajte s krvou, bunkami a dýchacím a vyzrádajú vysokými roztokmi. Nepoužívajte, ak je obdĺžnik poškodený. Používajte iba vyzrádajúci personál. Používajte súpravu hneď po otvorení a vybití baliča. Nepoužívajte opakom. Pri opakovaní použitia môže byť pacient vystavený riziku krvotoku. Testovanie na pľúcnom pyroge. Obchádzať.

Tłumaczenie: **kapec** w zbiorniku na roztwór (torebka lub butelka); **2)** zamykający regulator przepływu; **3)** ściągacz kolumny, tak, aby była do połowy pełna; **4)** następną otwórz regulator przepływu; **5)** otwórz zawór odpowiadający (jak w butelce jest roztwór, aby płyn mógł wypłynąć i usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza.  
Nie przechowywać w miejscach o wysokiej wilgotności, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w skrajnych temperaturach. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Może być używane tylko przez przeszkolonych person. Zestaw należy użyć natychmiast po otwarciu i usunięciu opakowania. Nie używać ponownie. Wskazówki stosowania może znaleźć pacjenta na ryłko załączenia krzyżowego. Testowanie na obecność pęcherzyków. Produkt zawiera ftaliany.

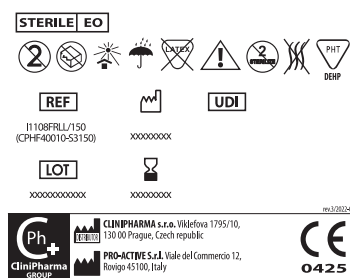


Blister size:  
226x99 mm

Printing size:  
190x69,5 mm

Printing color:  
PANTONE BLACK

### Print without frame

### Layout/Sticker on carton

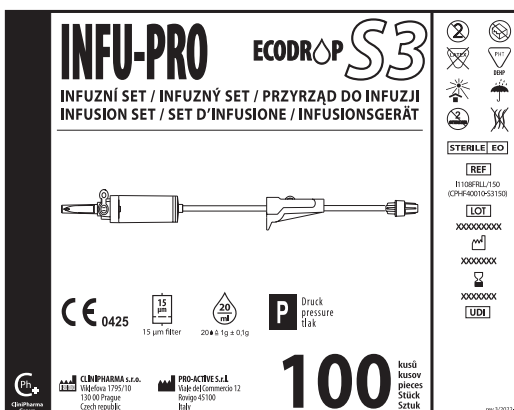

Printing size:  
180x140 mm

Printing color:  
PANTONE BLACK

2 stickers glued on shipping carton

### Packaging

corrugated cardboard, without iron pins, no plastic strips

**Size:** 430x290x250 mm

**Ctn:** 100 pcs

**Weight ctn: 3 kg**

**Volume:** 0,031175 cbm

**Palette:** 4.200pcs (42 ctn)

(1.2 x 0.8 x 2.0 m)



Blister: 08034028275661

Carton: 28034028275665

## Sterilization

EO sterilization

## Guaranty

5 years

## PRODUCTION LIST

CPH-PrL-S3 rev.2/11-2022