


Drawing

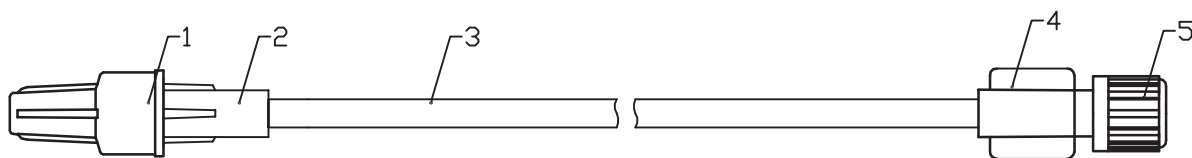

Material

01 Protective cap	PE, translucency
02 Male LL connector	ABS, transparent
03 Tubing	PVC / DEHP FREE material O.D.: 4,1mm I.D.: 2.9mm
04 Female LL connector	PC transparent
05 Protective cap	PP transparent/translucency

Layout/Soft blister

PRO-LONG TUBE

VERLÄNGERUNG / EXTENSION LINE
TUBO DI ESTENSIONE / PRZEDŁUŻACZ
PRODLUŽOVACÍ HADIČKA
PREDŁUŽOVACIA HADIČKA

HEIDELBERGER 140

Gebrauchsanweisung: 1) Entfernen Sie die Schutzkappen. 2) Konnectieren Sie das Verlängerungs-Set am IV-Set mit dem spezifischen Verbindungsstück und öffnen Sie diesen um den Fluss zu ermöglichen. 3) Öffnen Sie dann den Flow-Regler, damit Flüssigkeit fließen kann und entfernen Sie eventuell vorhandene Luftblasen.

Varování: Nicht in hoher Luftfeuchtigkeit, in direktem Sonnenlicht oder in extremen Temperaturen lagern. Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung. Nur für die Anwendung durch geschultes Personal. Verwenden Sie das Set sofort nach Öffnen und Entfernen der Verpackung. Nicht wiederverwenden. Wenn wiederverwendet, kann der Patient zu Kreuzinfektionen Risiken ausgesetzt sein. Pyrogenfreiheit geprüft.

Use instructions: 1) remove the protective caps. 2) Connect the extension to IV administration set through the specific connector, and if there is a stopcock, open or close the tap to accept the flow; 3) let the solution flow and remove eventual air bubbles.

Caution: Do not store in high humidity, direct sunlight or extreme temperatures. To be used by skilled personnel only. Do not use if packaging is damaged. Use the set immediately after removing the protective system. Pyrogen free. For single use. Do not reuse. If reused, the patient may be exposed to cross-infection risks.

Upozornění: 1) rnuvorení i cappucci di protezione. 2) collegare il set di estensione al set di somministrazione attraverso gli appositi raccordi e, se presente il rubinetto, aprire o chiudere le relative vie d'accesso. 3) fare defluire la soluzione ed eliminare eventuali bolle d'aria.

Upozorenie: Temu fumiidit. Non esporre a luce solare diretta. Non stoccare vicino a fonti di calore dirette. L'uso è limitato a personale specializzato. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o manomessa. Usare immediatamente dopo la rimozione dei sistemi di protezione. Smaltire dopo l'uso. Aprirogeno se l'imballaggio è intatto. Non riutilizzare. In caso di riutilizzo il paziente potrebbe essere esposto al rischio di infezioni incrociate. Aprirogeno.

Návod na použití: 1) Odstráňte ochranné kryty. 2) Pripojte predlžovací hadičku k infúznemu setu ples konektor a kľúč je tam kohout, otvorte ho pro zabezpečení prietoku. 3) Nechajte roztok íeť a odstráňte prípadné vzduškové bubliny.

Upozorenia: Neskladujte vo vysokej vlhkosti, na priamom slnecnom svetle ani pri extrémnych teplotách. Nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený. Používajte iba vyškoleným personálom. Používajte súpravu ihneď po otvorení a vyjmúť z obalu. Nepoužívajte znovu. Pri opakovanom použití môže byť pacient vystavený riziku krížovej infekcie. Testované na prítomnosť pyrogénov.

Návod na použití: 1) Odstráňte ochranné kryty. 2) Pripojte predlžovací hadičku k infúznemu setu cez konektor a kľúč je tam kohout, otvorte ho na zabezpečenie prietoku. 3) Nechajte roztok pretekať a odstráňte prípadné vzduškové bubliny.

Upozorenia: Neskladujte vo vysokej vlhkosti, na priamom slnecnom svetle ani pri extrémnych teplotách. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Používajte iba vyškoleným personálom. Používajte súpravu ihneď po otvorení a vyjmúť z obalu. Nepoužívajte znovu. Pri opakovanom použití môže byť pacient vystavený riziku krížovej infekcie. Testované na prítomnosť pyrogénov.

Instalación y uso: 1) Quitar las tapas protectoras. 2) Conectar la línea de extensión al conjunto de administración de la solución a través del conector específico y abrir la llave para permitir el flujo. 3) Permitir que la solución fluya y eliminar cualquier burbujas de aire.

Upute: Ne prechovávať v miestach s vysokou vlhkosťou, v bezprostrednom svetle slnca alebo v extrémnych teplotách. Používať iba v skyných teplotách. Nie uživateľ, príslušníkom personálu. Používať iba vyškoleným personálom. Používať súpravu ihneď po otvorení a vyjmúť z obalu. Nepoužívať znovu. Pri opakovanom použití môže byť pacient vystavený riziku krížovej infekcie. Testované na prítomnosť pyrogénov.

LUER-LOCK 140 cm LUER-LOCK
Ø 4 x 3 mm



REF EFB004AADF140 2021-06 20210625 2026-05

Layout/Sticker on carton



Printing size:
180x140 mm

Printing color:
PANTONE BLACK

2 stickers glued on
shipping carton

Packaging

corrugated cardboard, without iron pins, no plastic strips

Size: 330x260x200 mm

Ctn: 100 pcs

Weight ctn: 2,4 kg

Volume: 0,01716 cbm

Palette: 10.000pcs (cca 100 ctn)

Sterilization

EO sterilization

Guaranty

5 years

PRODUCTION LIST

CPH-PrL-HV2 rev.0/12-2021