


**Drawing**

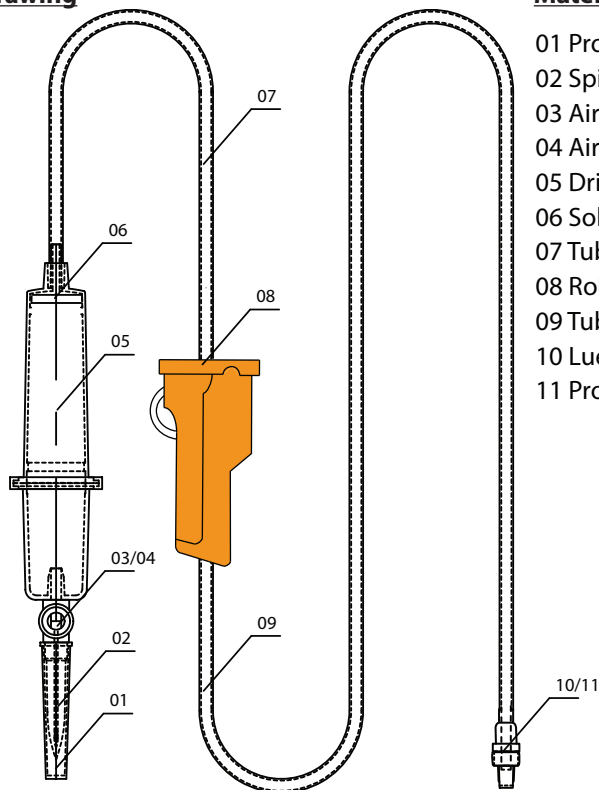

**Material**

01 Protective cap	PE, translucency
02 Spike	ABS, transparent
03 Air-vent	Snap PP, green
04 Air filter	Glass fiber, ø8mm, white
05 Drip chamber	ABS & soft non PVC, transparent
06 Solution filter	15µm filter, white & transparent
07 Tubing	PVC , ID: 3.0mm, OD:4.0mm
08 Roller clamp	ABS, orange roller, white wheel
09 Tubing	PVC , ID: 3.0mm, OD:4.0mm
10 Luer Lock	ABS, 4.0mm, transparent
11 Protective cap	PE, translucency

**Layout/Soft blister**

**CLASSIC**

**duoDROP D1**

1500 mm Schlauch  
Tubing  
Hadička

**SET D'INFUSIONE con doppia camera**  
**INFUSION SET with double drip chamber**  
**INFUSIONSGERÄT mit zweiteilige Tropfkammer**  
**INFUZNÝ SET s dvojitou kapací komorou**  
**INFUZNÝ SET s dvojitou kvapkacou komorou**

Printing size:  
101x215 mm

Printing color:  
PANTONE 347C

Print without frame

**Layout/Sticker on carton**

**SET D'INFUSIONE / INFUZNÝ SET / INFUZNÝ SET / INFUSIONSGERÄT**

**duoDROP classic D1**

SET D'INFUSIONE con doppia camera 1500mm  
INFUSION SET with double drip chamber 1500mm TUBING  
INFUSIONSGERÄT mit zweiteilige Tropfkammer 1500mm SCHLAUCH  
INFUZNÝ SET s dvojitou kapací komorou bez křídelček 1500mm HADIČKA  
INFUZNÝ SET s dvojitou kvapkacou komorou bez křídelček 1500mm HADIČKA

**100 kusů kusov pieces Stück**

**ISO 8536-8-IS-P**

**STERILE EO**

**CE 0425**

**CLINIPHARMA S.p.A.**  
Via della Vittoria 1795/10  
13100 Prato  
Czech republic

**PRO-ACTIVE S.r.l.**  
Via del Commercio 12  
Rovigo 45100  
Italy

Printing size:  
180x140 mm

Printing color:  
PANTONE 347C

2 stickers glued on  
shipping carton

**Packaging**

corrugated cardboard, without iron pins, no plastic strips

**Size:** 460x230x340 mm

**Ctn:** 100 pcs

**Weight ctn:**

**Volume:** 0,036 cbm

**Palette:** 4.700pcs (47 ctn)

**Sterilization**

EO sterilization

**Guaranty**

5 years

Istruzioni/Instructions/Instruktion/Návod:

1) Introdurre il perforatore nel contenitore di soluzione (sacca o fiasco); 2) chiudere il regolatore di flusso; 3) capovolgere il contenitore di soluzione e comprimere la camera e riempirla fino a metà; 4) aprire il regolatore; 5) aprire il tappo della presa d'aria nel caso di soluzione in bottiglia; fare diffondere la soluzione ed eliminare eventuali bolle d'aria.  
Avertissement: Tenir l'humidité. Non exposer à la lumière solaire directe. Non stocker à proximité de sources de chaleur. L'usage est limité à un personnel spécialisé. Non utiliser avec des seringues, introduisant la solution à l'air direct. Ne pas utiliser si la confezione è danneggiata o manomessa. Usare immediatamente dopo la rimozione dei sistemi di protezione. Smaltire dopo l'uso. Aprire con cautela il fiasco. Non riutilizzare. In caso di difficoltà il paziente potrebbe essere esposto al rischio di infezioni incrociate. Aprire con cautela. Contiene l'attacco. Non indicato per bambini, donne incinte e donne che allattano.  
1) führen Sie den Düsen in den Lösungbehälter (Beutel oder Flasche) ein; 2) schließen Sie den Flow Regler; 3) drehen Sie den Lösungbehälter auf den Kopf; drücken Sie auf die Kammer; bis sie halb gefüllt ist; 4) öffnen Sie dann den Flow Regler; 5) Öffnen Sie die Luftausgasse (im Falle einer Lösung in der Flasche); Damit die Flüssigkeit fließen kann und entfernen Sie eventuell vorhandene Luftblasen.  
Vorsicht: Nicht in hoher Luftfeuchtigkeit. In direktem Sonnenlicht oder in extremen Temperaturen lagern. Nicht zur Verwendung bei Blut, zellulären Komponenten und hochkonzentrierten Lösungen. Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung. Nur für die Anwendung durch geschultes Personal. Verwenden Sie das Set sofort nach Öffnen und Entfernen der Verpackung. Nicht wiederverwenden. Wenn wiederverwendet, kann der Patient zu Kreuzinfektionen Risiko ausgesetzt sein. Progenitätstest geprüft. Flakon enthält. Nicht indiziert für die Behandlung von Kindern, schwangere und stillende Frauen.  
1) vložte trn do nádoby na roztok (sáčok alebo fľaša); 2) uzavrite regulátor prietoku; 3) odvráťte komoru tak, aby bola do polovice plná; 4) po otvorení regulátoru pustiť; 5) otvorte oddušňovací ventíl (pokud je v balení roztok); aby tekutina mohla vytéct a odstranit vzdušné bubliny.  
Upozornění: Nechovávejte ve vysoké vlhkosti, na přímém slunci ani při extrémních teplotách. Nepoužívat s krví, buněčnými složkami a roztoky s vysokou viskozitou. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Pro použití pouze vyškoleným personálem. Používejte pouze soupravy Bred po otevření a vyjmání z obalu. Nepoužívejte znovu. Při opakovaném použití může být pacient vystaven většímu riziku infekce. Testováno na přítomnost pyrogénů. Obsahuje látky. Není určeno k léčbě dětí, těhotných a kojících žen.  
1) vložte trn do nádoby na roztok (sáčok alebo fľaša); 2) uzavrite regulátor prietoku; 3) stlačte komoru kým nie je do polovice plná; 4) potom otvoríte regulátor prietoku; 5) otvoríte oddušňovací ventíl (ak je vo fľaši roztok); aby tekutina mohla prúdiť a odstrániť vzdušné bubliny.  
Upozornenie: Nechováte vo vysokých vlhkosti, na priamom slnečnom svetle ani pri extrémnych teplotách. Nepoužívať s krvou, bunčnými zložkami a vysokou viskozitou roztokmi. Nepoužívať, ak je obal poškodený. Používať iba vyškoleným personálom. Používať súpravy ihneď po otvorení a vyjmá z obalu. Nepoužívať opakovane. Pri opakovanom použití môže byť pacient vystavený riziku krížovej infekcie. Testované na prítomnosť pyrogénov. Obsahuje látky. Nie je určené na liečbu detí, tehotných a dojčiacich žien.

**ISO 8536-8-IS-P**

**STERILE EO**

**15 µm filter** 204 ± 1g ± 0.1g

**REF** INFU-PRO I0208FRLL/150 (D1L4005/150)

**LOT** XXXXXXXXXXXXX

**CE 0425**

**CLINIPHARMA S.p.A.** Via della Vittoria 1795/10, 13100 Prato, Czech republic

**PRO-ACTIVE S.r.l.** Via del Commercio 12, Rovigo 45100, Italy

**PRODUCTION LIST**  
**CPH-PrL-D1 rev.1/06-2021**